

CH 3-150, Термостат с функцией нагрева и охлаждения, Combitherm-2



Combitherm-2 **CH 3-150** предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от -3°C до $+150^{\circ}\text{C}$ в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем корпусе модулей, где размещаются взаимозаменяемые блоки для пробирок. Такая конструкция термостата значительно повышает функциональность прибора.

Панель управления разделена на две части: левая — для установки и контроля температуры охлаждающего блока, правая — нагревающего. Управление блоками выполняется независимо, т. е. для каждого блока можно задать до 16 программ, позволяющих установить различные температуру и время термостатирования.

Для охлаждения (от комнатной температуры до -3°C) используется элемент Пельтье, для нагрева (до $+150^{\circ}\text{C}$) — электрическая нагревательная плита.

По желанию заказчика возможно изготовление других блоков

Время нагрева и охлаждения CH 3-150



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Нагревательный блок	$+25^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$
Диапазон установки температуры	
Нагревательный блок	5°C выше комн. ... $+150^{\circ}\text{C}$
Диапазон регулирования температуры	
Нагревательный блок Шаг установки температуры	1°C
Нагревательный блок Стабильность	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Охлаждающий блок	$-3^{\circ}\text{C} \dots +20^{\circ}\text{C}$
Диапазон установки температуры	
Охлаждающий блок	от 23°C ниже комн. t° до 5°C ниже комн. t°
Диапазон регулирования температуры	
Охлаждающий блок Шаг установки температуры	$0,1^{\circ}\text{C}$
Охлаждающий блок Стабильность	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Цифровая установка времени	1 мин–99 ч 59 мин (шаг 1 мин)



КАТ. №.

	CH 3-150 без блоков
BS-010418-AAA	230VAC 50/60Hz Euro вилка
-----	Дополнительные принадлежности
BS-010418-AK	B2-50
BS-010418-BK	B10-16
BS-010418-CK	B6-25
BS-010418-DK	B23-1.5
BS-010418-EK	B18-12
BS-010418-LK	B10-13
BS-010418-KK	B5-29

BS-010418-NK	IQ OQ документ
BS-010418-OK	PQ документ

СН 3-150, Термостат с функцией нагрева и охлаждения, Combitherm-2

Premium

Product Class

Программы регулируются
пользователем (температура
и время)

16 (для нагревания) + 16
(для охлаждения)

Дисплей	ЖК
Размеры (Д×Ш×В)	295×285×220 мм
Вес	5,6 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц
Потребляемый ток / мощность	1,8 А / 430 Вт



АКСЕССУАРЫ



B23-1.5

23 гнезда для 1.5 мл пробирок глубиной 35 мм



B10-16

10 гнезд Ø 16 мм глубиной 56 мм



B6-25

6 гнезд Ø 25 мм глубиной 40 мм




B2-50

2 гнезда Ø 48 мм глубиной 58 мм


СН 3-150, Термостат с функцией нагрева и охлаждения, Combitherm-2



B18-12
18 гнезд Ø 12 мм глубиной 58 мм

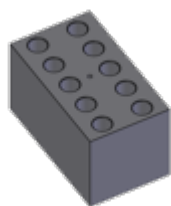

B10-13
10 плоскодонных гнезд Ø 13 мм глубиной 30 мм

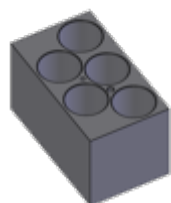

B5-29
5 плоскодонных гнезд Ø 29 мм глубиной 40 мм