




Новинка!

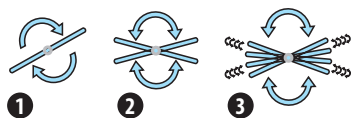

3 вида движений

- 1 Вращательное движение
- 2 Покачивающее движение
- 3 Встряхивание

Multi Bio RS-24 со станд. платформой PRS-26



Multi Bio RS-24 с доп. платформой PRSC-22



Мульти-ротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения 1 2 3 в одном модуле. Эта опция инструментов Biosan значительно расширяет возможности и увеличивает эффективность пробоподготовки тестируемых материалов и позволяет настраивать характер перемешивания в соответствии с индивидуальными задачами.

Мульти-ротатор предназначен для выполнения широкого ряда процедур в современных *life science* лабораториях: для реакций гибридизации, выращивания клеток, отмывки гелей, мягкой экстракции и гомогенизации биологических компонентов в растворах, а так же в реакции связывания и отмывки магнитных частиц.

Прибор может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +5°C до +40°C.

1 Вращательное движение:

Диапазон регулирования скорости	1–100 об/мин
Вертикальное вращение	360°
Таймер	0–250 с

2 Покачивающее движение:

Диапазон регулирования скорости	1–100 об/мин
Угол поворота	1–90° (шаг 1°)
Таймер	0–250 с

3 Встряхивание:

Таймер в режиме встряхивания/паузы	0–5 с
Угол поворота	0–5°(шаг 1°)

Общая спецификация:

Общий таймер работы прибора	1 мин–24 ч (шаг 1 мин)
Максимальная нагрузка	0,5 кг
Размеры	365 x 195 x 155 мм
Вес, не более	1,8 кг
Внешний блок питания	DC 12 В; 1,25 А

Номер каталога:

Multi Bio RS-24 с платформой PRS-26	BS-010117-AAG
PRS-26	BS-010117-GK
PRS-5/12	BS-010117-HK
PRS-10	BS-010117-IK
PRS-22	BS-010117-LK
PRSC-10	BS-010117-JK
PRS-1DP	BS-010149-DK

Описание и фотографии всех платформ смотрите на следующей странице

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru, <http://www.moslabo.ru/>

Платформы для Multi Bio RS-24

Описание платформ:				
Модель	Вместимость	Объем	Диаметр	Номер каталога
1 PRS-26 (станд.)	26	1,5–15 мл	до 15 мм	BS-010117-GK
2 PRS-5/12 (по заказу)	5 и 12	до 50 и 1,5–15 мл	до 30 и 15 мм	BS-010117-HK
3 PRS-10 (по заказу)	10	до 50 мл	BS-010117-IK	
4 PRSC-22(по заказу)	22	15 мл	до 15 мм	BS-010117-LK
5 PRSC-10 (по заказу)	10	до 50 мл	до 30 мм	BS-010117-JK
6 PRS-1DP (по заказу)	Платформа для глубоколоночных планшет и штативов для высоких пробирок 0,5 и 1 мл (Например: Thermo 3741MTX, 3742MTX, 3744MTX)			BS-010149-DK

1 PRS-26



2 PRS-5/12



3 PRS-10



4 PRSC-22



5 PRSC-10



6 PRS-1DP



Клипсы на PRSC-10



PRS — платформы для пробирок с универсальными резиновыми зажимами;

PRSC — платформы оснащенные клипсами, способные выдерживать пробирки с более тяжелыми растворами (песок, почва и т.д.).

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>