


Бутыль-промывалка с широким горлышком

Бутыль-промывалка с системой защиты

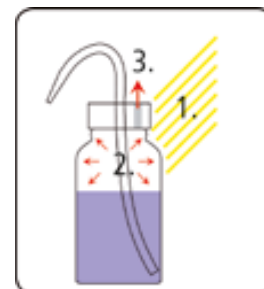

1. Повышение температуры
2. Давление увеличивается
3. Сброс избыточного давления

Бутыль-промывалка с надписью о содержимом, указаниями об опасностях и технике безопасности (H-фразы/P-фразы) согласно GHS с наименованием веществ на немецком, английском, французском и испанском языке, с пиктограммами GHS и номером CAS.

- ▶ Аккуратное заполнение через крышку с широким горлышком, диаметр горлышка 39 мм
- ▶ Из прозрачного ПЭНП жёлтого цвета с защитой от солнечного света
- ▶ Вместимость 500 мл

При повышении комнатной температуры или если в лабораторию светит солнце, то обычные бутылки-промывалки протекают из-за повышающегося внутреннего давления. Избыточное давление может сбрасываться через воздушный клапан, тем самым предотвращается протекание. При наличии воздушного клапана содержимое опрокинутых бутылок не вытекает, как это обычно случается с бутылками-промывалками, оборудованными шаровыми клапанами или вытяжными отверстиями.

- ▶ Аккуратное заполнение через крышку с широким горлышком, диаметр горлышка 39 мм
- ▶ Надпись согласно GHS с наименованием веществ на немецком, английском, французском и испанском, пиктограммами GHS и номером CAS
- ▶ Из прозрачного ПЭНП жёлтого цвета с защитой от солнечного света
- ▶ Вместимость 500 мл

LaboPlast

Бутыль-промывалка с широким горлышком

Надпись	Цвет	№ арт.		
Без надписи - нейтрально	Жёлтый	0310-3050	N3	
Дистиллированная вода	Прозрачный	0310-3051	N3	
Метанол	Зелёный	0310-3052	N3	
Этанол	Оранжевый	0310-3053	N3	
Изопропанол	Синий	0310-3054	N3	
Ацетон	Красный	0310-3055	N3	

LaboPlast

Бутыль-промывалка с системой защиты

Надпись	Цвет	№ арт.		
Без надписи - нейтрально	Жёлтый	0310-2056	N3	
Дистиллированная вода	Прозрачный	0310-2050	N3	
Метанол	Зелёный	0310-2052	N3	
Этанол	Оранжевый	0310-2054	N3	
Изопропанол	Синий	0310-2055	N3	
Ацетон	Красный	0310-2051	N3	