

Градуированная пипетка



- ▶ Из прозрачного ПП
- ▶ Градуировка и обозначения нанесены прочной синей краской
- ▶ Объём по выходу $\pm 0,1$ мл

Градуированная пипетка

Объём мл	№ арт.	
10	7550-0010	N3

Пипетки Мора




- ▶ Из прозрачного ПП
- ▶ Градуировка и обозначения нанесены прочной синей краской

Пипетки Мора

Объём мл	№ арт.	
10	7553-0010	N3
25	7553-0025	N3
50	7553-0050	N3

«ПиПамп» (Pi-Pump)

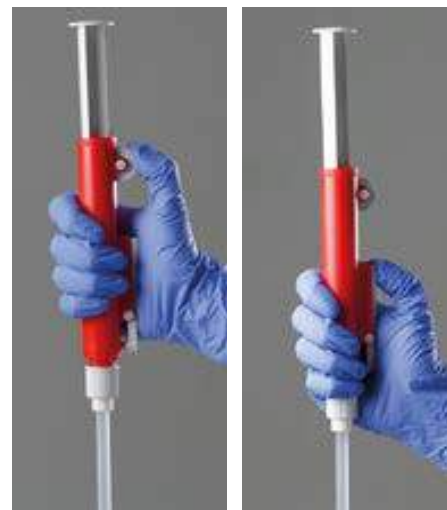

Всасывание вращением колесика. При остановке вращения колесика поршень перестает двигаться без утечки отобранной жидкости.

Опорожнение пипетки сливным рычагом. Дозирование малых объемов жидкости можно производить вращением колесика.

Тысячи раз испытан, удобно удерживается в руке. С помощью колесика Вы можете точно регулировать поступление жидкости в пипетку. Пипетку можно опорожнить, нажав на поршень. Сток боковым рычагом.

- ▶ Простота в использовании и точность
- ▶ В продаже имеются насосы трех размеров (с различной цветовой маркировкой)

«ПиПамп» (Pi-Pump)

Для пипеток объемом до мл	Цвет	№ арт.
2	Синий	7551-0002 N3
10	Зелёный	7551-0010 N3
25	Красный	7551-0025 N3