


Бурав «Квалирод» (Qualirod), конический

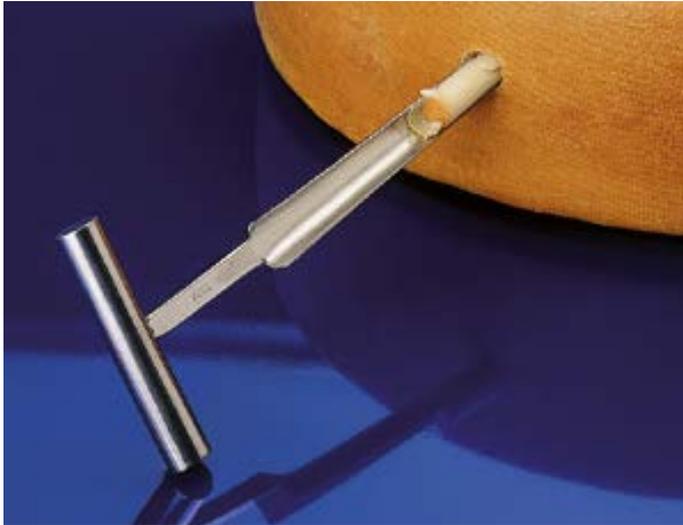

Ручной бурав конической формы, с полукруглым сечением, с острыми режущими кромками и жесткой ручкой. Предназначен для отбора проб мягких пастообразных веществ (сыра, масла, глины, мыла, воска и т.д.).

- ▶ Из нержавеющей стали V2A (1.4301)
- ▶ Можно стерилизовать
- ▶ Соответствует EN ISO 707

Бурав «Квалирод», цилиндрический



Цилиндрический полый ручной бурав с острой режущей кромкой. При вращении легко врезается в пастообразные и полутвердые вещества. Срезанную пробу удаляют из полости бурава с помощью выталкивающего штока. Общая длина 260 мм. Внутренний диаметр 8 мм, внешний диаметр 10 мм.

- ▶ Из нержавеющей стали V2A (1.4301)
- ▶ Можно стерилизовать
- ▶ Внутренний диаметр 8 мм, внешний диаметр 10 мм

Бурав «Квалирод» (Qualirod), конический

Глубина мм	№ арт.	
110	5311-0001 N4	
150	5311-0002 N4	
Принадлежности		
Описание	№ арт.	
Чехол для транспортировки, внутр. размеры 258x178x45 мм	3600-0021 N3	
Стикеры «Клоз-Ит Фуд & Фарма» (close-it food & pharma) см. стр. 84		

Бурав «Квалирод» (QualiRod), цилиндрический

Глубина мм	№ арт.	
200	5311-0101 N4	
Принадлежности		
Описание	№ арт.	
Чехол для транспортировки, внутр. размеры 258x178x45 мм	3600-0021 N3	