

Механические дозаторы Proline®

Надёжность по доступной цене

Тот факт, что нашим первым механическим дозатором Proline® по-прежнему пользуются более 200 тысяч специалистов во множестве лабораторий, свидетельствует о его надёжности и всегда современном практичном дизайне. Поскольку эта модель самая доступная по цене из всего ассортимента механических дозаторов компании Sartorius, она идеально подходит для использования в университетах и колледжах, а также в любых лабораториях, в которых необходимы недорогие надёжные инструменты для дозирования жидкостей.

Характеристики и основные преимущества

- Широкий выбор дозаторов как с регулируемым, так и с фиксированным объёмом.
- Объём от 2.5 мкл (5 мкл для фиксированных моделей) до 5 мл.
- Удобное регулирование объёма с защёлкиванием при фиксировании.
- Защитные фильтры для моделей > 10 мкл.
- Удобная система калибровки, например, для дозирования разных жидкостей.

Благодаря своему сравнительно небольшому весу, высокой точности и воспроизводимости результатов, этот дозатор используются также и многими профессионалами.





Механические дозаторы Proline® совместимы со многими моделями универсальных наконечников других марок, кроме того в серию входят модели с фиксированным объёмом. Благодаря этому модель подходит для нужд самых разных лабораторий.



□ Информация для оформления заказа

Proline°

Номер по каталогу	Количество каналов	Диапазон объёма дозирования (мкл)	Цветовая маркировка	Дискретность (мкл)	Объем при тестировании (мкл)	Точность* (%)	Воспроивзодимость (%)	Защитные Standard	фильтры Plus
720010	1	0.1 – 2.5	•	0.05	2.5 1.25 0.25	2.50 3.00 12.00	2.00 3.00 6.00	-	-
720015	1	0.5 – 10	•	0.10	10 5 1	1.00 1.50 2.50	0.80 1.50 1.50	-	-
720080	1	2-20	•	0.50	20 10 2	0.90 1.20 3.00	0.40 1.00 2.00	721008	721018
720025	1	5-50	•	0.50	50 25 5	0.60 0.90 2.00	0.30 0.60 2.00	721008	721018
720050	1	10-100	•	1.00	100 50 10	0.80 1.00 3.00	0.20 0.40 1.00	721007	721017
720070	1	20-200	•	1.00	200 100 20	0.60 0.80 2.50	0.20 0.30 0.80	721007	721017
720060	1	100 – 1000	•	5.00	1000 500 100	0.60 0.70 2.00	0.20 0.25 0.70	721006	721016
720110	1	1000 – 5000	•	50.0	5000 2500 1000	0.50 0.60 0.70	0.20 0.30 0.30	721005	721015
720210	8	0.5 – 10	•	0.10	10 5 1	1.50 2.50 4.00	1.50 2.50 4.00	_	_
720220	8	5-50	•	0.50	50 25 5	1.00 1.50 3.00	0.50 1.00 2.00	721014	-
720240	8	50-300	•	5.00	300 150 50	0.70 1.00 1.50	0.25 0.50 0.80	721014	-
720310	12	0.5 – 10	•	0.10	10 5 1	1.50 2.50 4.00	1.50 2.50 4.00	-	-
720320	12	5-50	•	0.50	50 25 5	1.00 1.50 3.00	0.50 1.00 2.00	721014	-
720340	12	50-300	•	5.00	300 150 50	0.70 1.00 1.50	0.25 0.50 0.80	721014	-

^{*} Указанные значения точности и воспроизводимости действительны только для режима дозирования и выявлены в условиях строгого контроля в ходе типовых тестов по стандарту ISO 8655. Поскольку компания Sartorius постоянно совершенствует свою продукцию, показатели точности и воспроизводимости могут быть изменены без предварительного уведомления.


Информация для оформления заказа

Proline® ФИКСИРОВАННЫЙ объём

Номер по каталогу	Количество каналов	Объем дозирования (мкл)	Цветовая маркировка	Объем при тестировании (мкл)	Точность*	Воспроивзодимость	ость Защитные фильтры	
					(%)	(%)	Standard	Plus
722001	1	5		5	1.30	1.20	-	_
722004	1	10		10	0.80	0.80	-	_
722010	1	20	0	20	0.60	0.50	721008	721018
722015	1	25	0	25	0.50	0.30	721008	721018
722020	1	50	0	50	0.50	0.30	721008	721018
722025	1	100	•	100	0.50	0.30	721007	721017
722030	1	200	•	200	0.40	0.20	721007	721017
722035	1	250	•	250	0.40	0.20	721006	721016
722040	1	500	•	500	0.30	0.20	721006	721016
722045	1	1000	•	1000	0.30	0.20	721006	721016
722050	1	2000	•	2000	0.30	0.15	721005	721015
722055	1	5000	•	5000	0.30	0.15	721005	721015

^{*} Указанные значения систематической и случайной ошибок действительны только для режима дозирования и определены в условиях строгого контроля в ходе типовых тестов по стандарту ISO 8655. Поскольку компания Sartorius постоянно совершенствует свою продукцию, показатели систематической и случайной ошибок могут изменяться без предварительного уведомления.

Руководство по выбору наконечников

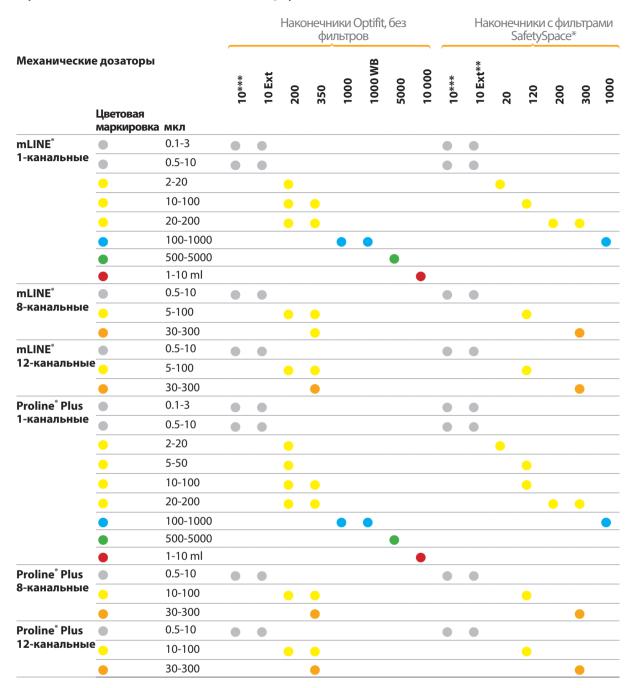

^{*} Примечание: Наконечники Low Retention выпускаются для объёмов до 1200 мкл включительно.

^{**} Наконечники с обычным воздушным зазором

^{***} Улучшенные показатели точности и воспроизводимости при использовании стерильных наконечников 10 мкл

^{*} Улучшенные показатели точности и воспроизводимости при использовании стерильных наконечников 10 мкл

^{**} Наконечники с обычным воздушным зазором

