

«СтериПласт» (SteriPlast®) от Bürkle



b SteriPlast

Изделия компании Bürkle – совки, шпатели и ложки – представляют собой высококачественную продукцию эргономичного дизайна, специально разработанного и оптимизированного для забора проб. Они производятся в собственной чистой комнате Bürkle, там же происходит их сборка и раздельная упаковка, а также последующая стерилизация гамма-излучением (мин. 10 kGy).

Тем самым изделия "СтериПласт" (SteriPlast®) соответствуют всем требованиям для абсолютно стерильного отбора проб с первоклассной сертификацией.



Производство согласно нормам чистой комнаты класса 7



Индивидуальная упаковка



Стерилизация гамма-излучением

b SteriPlast Bio

Продукция линии "СтериПласт Био" (SteriPlast® Bio) производится исключительно из возобновляемого сырья, а затем также стерилизуется гамма-излучением (мин. 10 kGy). Даже раздельная упаковка нашей продукции изготавливается из биополиэтилена, что придаёт изделиям целостную логическую сбалансированность. Все материалы полностью пригодны для вторичной переработки и производятся без применения ископаемого сырья. Тем самым достигается уменьшение объёмов выброса CO₂ и сокращение парникового эффекта.

Безупречная комбинация высочайшей чистоты и экологической сбалансированности!

Пробоотборный совок «СтериПласт Био»



Пробоотборный совок «СтериПласт Био» (SteriPlast® Bio) из Green PE изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). С целью одноразового использования он раздельно упаковывается в плёнку из биополиэтилена, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Био-материал Green PE обладает всеми характеристиками обычного полиэтилена, идеально подходящими для отбора проб, однако он производится из возобновляемого сырья и полностью пригоден для вторичной переработки.

Пробоотборный совок – это идеальное решение для работы с порошками, гранулятами или пастами.

- ▶ Изделие и упаковка из возобновляемого сырья
- ▶ Green PE, белый
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Пробоотборный совок «СтериПласт Био» (SteriPlast® Bio)    

Объём мл	Длина мм	Штук в упаковке	№ арт.	
25	141	10	5379-1001	N4
50	160	10	5379-1003	N4
100	205	10	5379-1005	N4
150	216	10	5379-1007	N4

Пробоотборный совок «СтериПласт» (SteriPlast®)

Пробоотборный совок «СтериПласт» (SteriPlast®) из полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000, кроме совка на 1000 мл). Он собирается, отдельно упаковывается, а затем стерилизуется гамма-излучением. Пробоотборный совок – это идеальное решение для работы с порошками, гранулятами или пастами.

Сразу же после отбора пробы совок снова закрывается прозрачной крышкой, обеспечивая отобранному материалу стерильность и защиту от загрязнений.

- ▶ Полистирол, белый
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA



При разработке пробоотборного совка мы уделили особое внимание эргономике. Благодаря специальной форме ручки и слегка изогнутой передней кромке совок устойчив в горизонтальном положении, то есть его можно поставить на какое-либо основание, не опасаясь просыпать набранную пробу.

Пробоотборный совок «СтериПласт» (SteriPlast®)

Объем мл	Исполнение	Длина мм	Штук в упаковке	№ арт.	
25	без крышки	141	10	5378-1001	N4
25	с крышкой	142	10	5378-1002	N4
50	без крышки	160	10	5378-1003	N4
50	с крышкой	161	10	5378-1004	N4
100	без крышки	205	10	5378-1005	N4
100	с крышкой	206	10	5378-1006	N4
150	без крышки	216	10	5378-1007	N4
150	с крышкой	218	10	5378-1008	N4
250	без крышки	232	10	5378-1013	N4
250	с крышкой	235	10	5378-1014	N4
500	без крышки	280	10	5378-1015	N4
500	с крышкой	283	10	5378-1016	N4
1000	без крышки	332	10	5378-1019	N4

Пробоотборный шпатель «СтериПласт»



Пробоотборный шпатель «СтериПласт» (SteriPlast®) из полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Он собирается, раздельно упаковывается, а затем стерилизуется гамма-излучением. Даже такое одноразовое изделие обеспечивает возможность прокола тары, например, бумажного или полимерного мешка благодаря длинной и стабильной ручке эргономичной формы, а также острому лезвию. Пробоотборный шпатель представляет собой идеальное решение для отбора проб в виде порошка, гранулята или пасты.

Шпатель с прозрачным футляром можно закрыть сразу же после отбора материала, защищая тем самым взятую стерильную пробу от внешних загрязнений.

- ▶ Полистирол, белый
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Пробоотборный шпатель «СтериПласт» (SteriPlast®)						
Исполнение	Общая длина мм	Глубина врезания мм	Штук в упаковке	№ арт.		
без футляра	263	150	10	5378-1009	N4	
с футляром	268	150	10	5378-1010	N4	

Пробоотборный шпатель «СтериПласт»



Пробоотборный шпатель «СтериПласт Био» из Green PE изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). С целью одноразового использования он раздельно упаковывается в плёнку из биополиэтилена, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Биополимер Green PE обладает всеми характеристиками обычного полиэтилена, идеально подходящими для отбора проб, он полностью пригоден для вторичной переработки и производится из возобновляемого сырья. Даже такое одноразовое изделие обеспечивает возможность прокола тары, например, бумажного или полимерного мешка благодаря длинной и стабильной ручке эргономичной формы, а также острому лезвию. Пробоотборный шпатель представляет собой идеальное решение для отбора проб в виде порошка, гранулята или пасты.

- ▶ Изделие и упаковка из возобновляемого сырья
- ▶ Green-PE, белый
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Пробоотборный шпатель «СтериПласт Био» (SteriPlast® Bio)							
Общая длина мм	Глубина врезания мм	Штук в упаковке	№ арт.				
263	150	10	5379-1009	N4			

Пробоотборная ложка «СтериПласт» (SteriPlast®)

Пробоотборная ложка «СтериПласт Био» (SteriPlast® Bio)



Пробоотборная ложка «СтериПласт» (SteriPlast®) из полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Она отдельно упаковывается, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Пробоотборная ложка предлагается в двух размерах: 2,5 мл (как чайная ложка) и 10 мл (как столовая ложка) и представляет собой идеальное решение для забора проб в виде порошка, гранулята, пасты или жидкости.

- ▶ Полистирол, белый
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Пробоотборная ложка «СтериПласт Био» из Green PE изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). С целью одноразового использования она отдельно упаковывается в плёнку из биополиэтилена, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Био-материал Green PE обладает всеми характеристиками обычного полиэтилена, идеально подходящими для отбора проб, однако он производится из возобновляемого сырья и полностью пригоден для вторичной переработки.

Пробоотборная ложка предлагается в двух размерах: 2,5 мл (как чайная ложка) и 10 мл (как столовая ложка) и представляет собой идеальное решение для забора проб в виде порошка, гранулята, пасты или жидкости.

- ▶ Изделие и упаковка из возобновляемого сырья
- ▶ Green PE, белый
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA



Пробоотборная ложка «СтериПласт» (SteriPlast®)

Длина мм	Объём мл	Штук в упаковке	№ арт.
127	2,5	100	5378-1011 N4
170	10	100	5378-1012 N4

Пробоотборная ложка «СтериПласт Био» (SteriPlast® Bio)

Длина мм	Объём мл	Штук в упаковке	№ арт.
127	2,5	100	5379-1011 N4
170	10	100	5379-1012 N4

Одноразовые пробоотборники, синие



Синий цветовой оттенок отсутствует в естественной форме в пищевых продуктах. Поэтому синие изделия или их компоненты, если таковые окажутся в производственной цепи, очень быстро и легко распознать и найти в ходе визуального контроля.

Таким образом, использование синих инструментов помогает соответствовать требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел. Это представляет собой важную предпосылку особенно в таких областях, как производство и переработка пищевой продукции, а также в кормовой и фармацевтической отрасли.

- ▶ Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS
- ▶ Специальная разработка для пищевой, кормовой и фармацевтической промышленности
- ▶ Полистирол, синий
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Совок для пищевых продуктов, синий



SteriPlast

Совок для пищевых продуктов «СтериПласт» (SteriPlast®) из синего полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000, кроме совка на 1000 мл). Он собирается, раздельно упаковывается для одноразового применения, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Совок для пищевых продуктов – это идеальное решение для работы с порошками, гранулами или пастами.



Совок для пищевых продуктов, синий

Объем мл	Длина мм	Штук в упаковке	№ арт.	
25	141	10	5378-3001	N4
50	160	10	5378-3003	N4
100	205	10	5378-3005	N4
150	216	10	5378-3007	N4
250	232	10	5378-3013	N4
500	280	10	5378-3015	N4
1000	332	10	5378-3019	N4



Шпатель для пищевых продуктов, синий



Шпатель для пищевых продуктов «СтериПласт» (SteriPlast®) из синего полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Он собирается, раздельно упаковывается для одноразового применения, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Даже такое одноразовое изделие обеспечивает возможность прокола тары, например, бумажного или полимерного мешка, благодаря длинной и стабильной ручке эргономичной формы, а также острому лезвию. Шпатель для пищевых продуктов представляет собой идеальное решение для отбора проб из порошка, гранулята или пасты.

- Полистирол, синий
- Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA



Шпатель для пищевых продуктов, синий

Общая длина мм	Глубина врезания мм	Штук в упаковке	№ арт.	
263	150	10	5378-3009	N4

Ложка для пищевых продуктов, синяя



Ложка для пищевых продуктов «СтериПласт» (SteriPlast®) из синего полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Она раздельно упаковывается для одноразового применения, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Ложка для пищевых продуктов предлагается в двух размерах: 2,5 мл (как чайная ложка) и 10 мл (как столовая ложка). Она представляет собой идеальное решение для забора проб в виде порошка, гранулята, пасты или жидкости.

- Полистирол, синий
- Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA



Ложка для пищевых продуктов, синяя

Длина мм	Объем мл	Штук в упаковке	№ арт.	
127	2,5	100	5378-3011	N4
170	10	100	5378-3012	N4

Детектируемые одноразовые пробоотборники



В дополнение к синему цвету, данные совки, шпатели, ложки и скребки содержат в своём материале специальное вещество, которое делает их видимыми в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Таким образом, эти изделия, несмотря на то, что они изготовлены из полимеров, могут быть отсортированы стандартными системами контроля инородных тел.

- ▶ Возможность выявления с помощью электронного цветодетектора, металлодетектора или рентгеновских лучей
- ▶ Полистирол детектируемый, синий
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Детектируемый совок, синий



Детектируемые совки «СтериПласт» (SteriPlast®) из синего полистирола изготавливаются в нашей чистой комнате класса 7 (10.000, кроме совка на 1000 мл). Они собираются, отдельно упаковываются для одноразового применения, а затем стерилизуются гамма-излучением. Детектируемые совки – это идеальное решение для работы с порошками, гранулятами или пастами.



Детектируемый совок, синий

Объём мл	Длина мм	Штук в упаковке	№ арт.	
25	141	10	5378-2001	N4
50	160	10	5378-2003	N4
100	205	10	5378-2005	N4
150	216	10	5378-2007	N4
250	232	10	5378-2013	N4
500	280	10	5378-2015	N4
1000	332	10	5378-2019	N4

Детектируемый шпатель, синий



Детектируемые шпатели «СтериПласт» (SteriPlast®) из синего полистирола изготавливаются в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Они собираются, раздельно упаковываются для одноразового применения, а затем стерилизуются гамма-излучением.

Даже такое одноразовое изделие обеспечивает возможность прокола тары, например, бумажного или полимерного мешка, благодаря длинной и стабильной ручке эргономичной формы, а также острому лезвию. Детектируемые шпатели представляют собой идеальное решение для отбора проб из порошка, гранулята или пасты.

- ▶ Полистирол детектируемый, синий
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Детектируемый шпатель, синий

Общая длина мм	Глубина врезания мм	Штук в упаковке	№ арт.	
263	150	10	5378-2009	N4

Детектируемая ложка, синяя



Детектируемые ложки «СтериПласт» (SteriPlast®) из синего полистирола изготавливаются в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Они собираются, раздельно упаковываются для одноразового применения, а затем стерилизуются гамма-излучением.

Ложка одноразового использования предлагается в двух размерах: 2,5 мл (как чайная ложка) и 10 мл (как столовая ложка). Она представляет собой идеальное решение для забора проб в виде порошка, гранулята, пасты или жидкости.

- ▶ Полистирол детектируемый, синий
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Детектируемая ложка, синяя

Длина мм	Объем мл	Штук в упаковке	№ арт.	
127	2,5	100	5378-2011	N4
170	10	100	5378-2012	N4

«ДиспоДиппер» (DispoDipper)



Погружная пробирка, изготовленная в условиях чистой комнаты, для отбора проб специально для одноразового применения. По причине синего цвета также идеально подходит для применения в пищевой, кормовой и фармацевтической промышленности. Контейнер для проб со шкалой обеспечивает точный замер. После отбора пробы контейнер можно герметизировать от воздействия жидкостей. Закрытая конструкция ручки обеспечивает стабильность работы.

Контейнер для проб имеет объём 50 мл, 100 мл или 250 мл. В зависимости от исполнения, забор проб возможен из контейнеров с отверстиями диаметрами от 52 мм (бочковое отверстие 2"), от 65 мм или от 85 мм. Таким образом, «ДиспоДиппер» (DispoDipper) идеально подходит для отбора проб из бочек, канистр и прочей тары.

«ДиспоДиппер» (DispoDipper) имеет цельную конструкцию. Он обеспечивает отбор проб и последующую транспортировку в одном приборе. Таким образом, практически исключается перекрёстное загрязнение или загрязнение образца посторонними веществами.

- ▶ ПП, синий, прозрачный
- ▶ Индивидуальная упаковка и, в качестве опции, стерилизация гамма-излучением
- ▶ Производство и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA
- ▶ Погружная пробирка со шкалой в миллилитрах и унциях
- ▶ Глубина погружения 270 мм

Применение

1. Для отбора пробы сначала следует распаковать пробоотборник и отсоединить крышку от ручки в месте заданного отделения.
2. После этого произведите отбор пробы и закройте контейнер крышкой.
3. После отбора пробы ручку можно удалить в месте заданного отделения на контейнере для проб. Этим достигается простая и компактная транспортировка отобранных проб.



LaboPlast




SteriPlast

«ДиспоДиппер» (DispoDipper)

Объём мл	Исполнение	Ø мм	Высота с крышкой мм	Общая длина мм	Штук в упаковке	№ арт.
50	стандарт	40	98	417	20	5393-7000 N4
50	стерильный	40	98	417	20	5393-7001 N4
100	стандарт	53	98	415	20	5393-7010 N4
100	стерильный	53	98	415	20	5393-7011 N4
250	стандарт	72	116	429	20	5393-7020 N4
250	стерильный	72	116	429	20	5393-7021 N4

Пакеты для проб «СтериБэг» (SteriBag) | Стерильные пакеты для проб, с разворотом

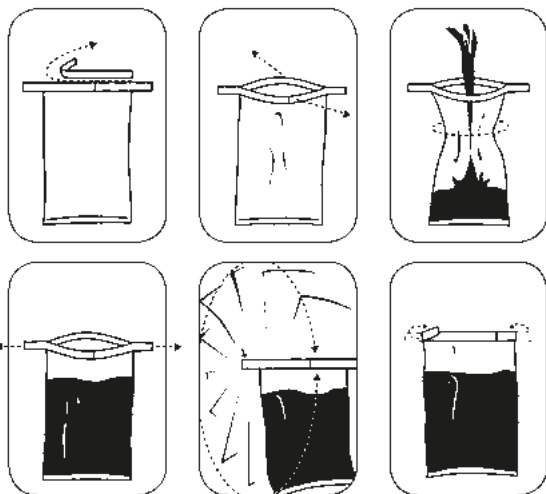



Стерильные пакеты для проб «СтериБэг» (SteriBag) для проб из области химии, фармацевтики, медицины, ветеринария, для продуктов питания и т.п.

Пакеты для проб изготовлены из полиэтилена, поэтому очень прочные и герметичные.

Пакеты для проб «СтериБэг» (SteriBag) отличаются надежностью в обращении. При квалифицированном использовании можно брать стерильные пробы.

Интегрированная безопасность: Концы проволочных хомутиков запаяны в пленку тем самым предотвращается повреждение кожи.

- ▶ Стерильные, без рибонуклеаз, дезоксирибонуклеаз и пирогенов
- ▶ Можно надписывать
- ▶ Герметичные
- ▶ Компактные
- ▶ Прозрачные
- ▶ С практичным разрывным запором
- ▶ Надежность доказана миллионы раз

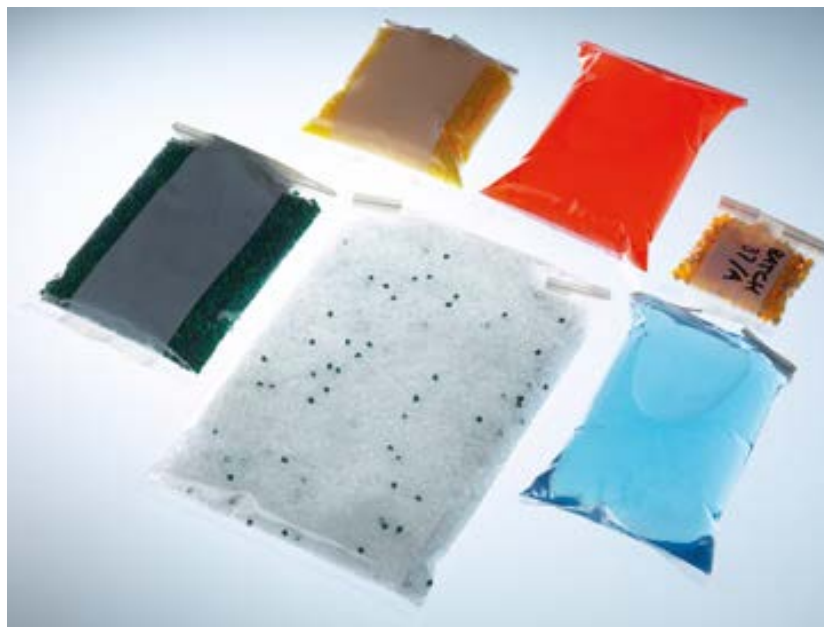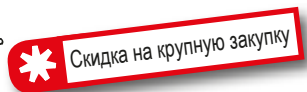

Пакеты для проб «СтериБэг» (SteriBag)								
Объем мл	Исполнение	Д x Ш мм	Штук в упаковке	№ арт.				
60	без поля для пометок	127 x 76	500	5344-0060	N3			
60	с полем для пометок	127 x 76	500	5344-0061	N3			
150	без поля для пометок	178 x 76	500	5344-0180	N3			
150	с полем для пометок	178 x 76	500	5344-0181	N3			
450	без поля для пометок	229 x 114	500	5344-0540	N3			
450	с полем для пометок	229 x 114	500	5344-0541	N3			
650	без поля для пометок	229 x 140	500	5344-0720	N3			
650	с полем для пометок	229 x 140	500	5344-0721	N3			
800	без поля для пометок	305 x 114	500	5344-0810	N3			
800	с полем для пометок	305 x 114	500	5344-0811	N3			
1650	без поля для пометок	305 x 178	250	5344-1650	N3			
1650	с полем для пометок	305 x 178	250	5344-1651	N3			

Пакеты для проб «СтериБэг СтендАп»



„СтериБэг СтендАп“ (SteriBag StandUp) – это пакеты для проб с жёстким дном. Дно специальной конструкции разворачивается, как только пакет начинает наполняться. Таким образом, „СтериБэг СтендАп“ (SteriBag StandUp) сохраняет стабильность и устойчивость без каких-либо дополнительных стоек и держателей, обе руки остаются свободными для отбора и заполнения проб. Благодаря проволочным хомутам на горловине пакет остаётся открытым, чем обеспечивается удобство его заполнения. Пакеты для проб представляют собой идеальную, компактную, небьющуюся, недорогую и стерильную замену для бутылей и стаканов. Их можно использовать для жидкостей, порошков, твёрдых и пастообразных материалов, а также и для пищевых продуктов. Благодаря своей устойчивости пакеты для проб «СтериБэг СтендАп» (SteriBag StandUp) можно просто и безопасно транспортировать. «СтериБэг СтендАп» (SteriBag StandUp), пакет для проб, гарантирующий удобство работы с пробами.

- Устойчивость
- Герметичность
- Стерильные, без рибонуклеаз, дезоксирибонуклеаз и пирогенов
- С полем для пометок

Пакеты для проб «СтериБэг СтендАп»				
Объём мл	Д x Ш мм	Штук в упаковке	№ арт.	
400	229 x 114	500	5344-0400	N3
600	229 x 152	500	5344-0600	N3

Пакет для проб «СтериБэг Блю»



Стерильный пакет для проб «СтериБэг Блю» (SteriBag Blue) особенно подходит для применения в пищевой, кормовой и фармацевтической промышленности. С целью предотвращения попадания посторонних предметов в ходе производственного процесса, пакет для проб и замок с отрывной полоской имеют синий цветовой оттенок. Этот цвет отсутствует в естественной форме в пищевых продуктах. Поэтому он хорошо различим, и его можно уверенно различить при визуальной проверке, если пакет или его элементы окажутся в продукции. Одноразовый пакет для проб имеет допуск для контакта с пищевыми продуктами. Он подходит для хранения и транспортировки твёрдых, полутвёрдых и жидких сред. Благодаря большой горловине «СтериБэг Блю» (SteriBag Blue) легко заполняется. Пакет для проб с полем для пометок экономит место, легко транспортируется и обеспечивает герметичность.

- Полиэтилен, синий
- Герметичные
- С полем для пометок
- Стерильные, без рибонуклеаз, дезоксирибонуклеаз и пирогенов



Пакет для проб «СтериБэг Блю»				
Объём мл	Д x Ш мм	Штук в упаковке	№ арт.	
650	229 x 140	500	5344-7008	N3
1650	305 x 178	250	5344-7012	N3

Пакет для проб «СтериБэг Клинрум»

Оригинальные пакеты для проб «СтериБэг Премиум»



Пакет для проб «СтериБэг Клинрум» (SteriBag Cleanroom) в двойной упаковке можно заносить непосредственно в чистую комнату. В каждой двойной упаковке находятся 25 пакетов для проб, которые можно извлекать один за другим, чем обеспечивается их великолепная пригодность для заноса в чистую комнату. Затем стерильные пакеты можно использовать непосредственно в чистой комнате.

«СтериБэг Клинрум» (SteriBag Cleanroom) стерилен как изнутри, так и снаружи. Это гарантирует чистоту хранения и транспортировку твёрдых, полутвёрдых и жидких сред. Такой пакет для проб идеален при использовании в химической и фармацевтической отрасли.

Одноразовый пакет для проб имеет поле для пометок, экономит место и легко транспортируется. Большая горловина обеспечивает удобное заполнение пакета отбираемым материалом.

- ▶ Стерильные, в двойной упаковке
- ▶ Без рибонуклеазы, дезоксирибонуклеазы и пирогенов
- ▶ Из прозрачного ПЭ
- ▶ Герметичные
- ▶ С полем для пометок



Пакеты для проб «СтериБэг Премиум» (SteriBag Premium) уникально сочетают высокий уровень безопасности, стерильность, оригинальную герметизацию и отслеживаемость. Они используются для безопасной транспортировки и хранения образцов.

После пробоотбора, образец сразу может быть помещён в стерильный пакет для проб. Оригинальное закрытие герметизирует мешок и делает его надёжным и непроницаемым для жидкости. При повторной попытке открыть замок, появляется хорошо видимое слово «STOP». Как пакет для проб, так и поле для разрыва помечены идентификационным номером, это обеспечивает полную документацию и отслеживание.

«СтериБэг Премиум» (SteriBag Premium) отвечает высоким требованиям применения в пищевой, фармацевтической, медицинской отраслях а также в чистых помещениях или биотехнологии.

- ▶ Со стерилизацией гамма-излучением (SAL 10^{-6})
- ▶ Со встроенным доказательством вскрытия
- ▶ Точная идентификация по коду отслеживания
- ▶ Можно использовать для пищевых продуктов

Пакет для проб «СтериБэг Клинрум»

Объём мл	Д x Ш мм	Штук в упаковке	№ арт.	
800	305 x 114	500	5344-8010	N3
1650	305 x 178	250	5344-8012	N3

Оригинальные пакеты для проб «СтериБэг Премиум»

Объём мл	Д x Ш мм	Штук в упаковке	№ арт.	
300	200x145	100	5344-8000	N4

«СтериПласт Кит» (SteriPlast Kit®)



Стерильный набор для отбора проб – «СтериПласт Кит» (SteriPlast® Kit) состоит из десяти пробоотборных шпателей или пробоотборных совков и десяти оригинальных пакетов для проб «СтериБэг Премиум» (SteriBag Premium). Таким образом «СтериПласт Кит» (SteriPlast® Kit) является идеальной комбинацией для пробоотбора, в котором особо важное значение имеют чистота и стерильность. Все детали стерилизованы гамма-излучением и могут быть использованы для пищевых продуктов. Совки или шпатели изготовлены в чистой комнате и индивидуально упакованы. Пакет для проб «СтериБэг Премиум» (SteriBag Premium) имеет встроенное герметичное закрытие, которое делает его непроницаемым для жидкостей. Индивидуальный код для отслеживания, как на пакете для проб, так и на поле для разрыва гарантирует полную документацию и отслеживание. «СтериПласт Кит» (SteriPlast® Kit) включает в себя совки объемом 50 мл или шпатели с глубиной врезания 150 мм, а также «СтериБэг Премиум» (SteriBag Premium) 300 мл.

- ▶ Совки объемом 50 мл & «СтериБэг Премиум» (SteriBag Premium) 300 мл
- ▶ Шпатели с глубиной врезания 150 мм & «СтериБэг Премиум» 300 мл

«СтериПласт Кит» (SteriPlast Kit®) – стерильный набор для отбора проб			
Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.	
Совок и пакет	10	5378-8003	N4
Шпатель и пакет	10	5378-8009	N4

Шприц «СтериПласт» (SteriPlast®)



Шприц предназначен для отбора и хранения стерильных проб. Количество образца определяется по нанесенной на шприц шкале. Шприцы поставляются в стерильной упаковке и готовы к немедленному использованию. Специальная трубка позволяет увеличить длину шприца на любую величину. Редукционный адаптер поставляется в комплекте со шприцем емкостью 100 мл.

- ▶ Из прозрачного ПП
- ▶ Шкала для определения объема
- ▶ Стерильные, в индивидуальной упаковке

Скидка на крупную закупку

Шприц «СтериПласт» (SteriPlast®)			
Объем мл	Штук в упаковке	Градировка мл	№ арт.
50	10	1	5325-0060 N4
100	10	2	5325-0100 N4

Пинцет, остроконечный, за- круглённой формы



Пинцет из нержавеющей стали закруглённой формы обеспечивает точность работ в лабора-
тории. С помощью острых рифлёных концов
можно работать с чувствительными материала-
ми, материей или пробами. Для нескользящего
захвата пинцета из нержавеющей стали имеется
рифление на ручке. Закруглённый лаборатор-
ный пинцет применяется в химической, фарма-
цевтической, косметической и пищевой отрасли.

- ▶ Нержавеющая сталь V2A (1.4301)
- ▶ Рифление на концах и ручке для удобного
использования



Пинцет, остроконечный, закруглённой формы   		
Общая длина мм	№ арт.	
105	5386-0100	N4
130	5386-0102	N4
160	5386-0104	N4

Пинцет, остроконечный, прямой формы



Прочный пинцет из нержавеющей стали идеа-
лен для использования в лаборатории. Острые
концы с рифлёной внутренней структурой обе-
спечивают надёжный захват различных проб.
Рифлёная ручка гарантирует хорошее удержа-
ние. Этот лабораторный пинцет применяется
для точных работ в химической, фармацевтиче-
ской, косметической и пищевой отрасли.

- ▶ Нержавеющая сталь V2A (1.4301)
- ▶ Рифление на концах и ручке для удобного
использования




Пинцет, остроконечный, прямой формы   		
Общая длина мм	№ арт.	
105	5386-0200	N4
130	5386-0202	N4
160	5386-0204	N4

Пинцет, тупоконечный, прямой формы



Для точных лабораторных работ подходит пин-
цет из нержавеющей стали. Пинцет имеет пря-
мую форму и тупые концы, внутренняя сторона
которых рифлёная. Тем самым обеспечивается
точный захват различных материалов, тканей
или проб. Лабораторный пинцет изготавливает-
ся из нержавеющей стали и имеет рифлёную
ручку.

- ▶ Нержавеющая сталь V2A (1.4301)
- ▶ Рифление на концах и ручке для удобного
использования

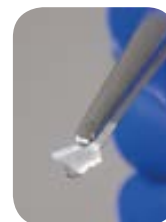

Пинцет, тупоконечный, прямой формы   		
Общая длина мм	№ арт.	
105	5386-0300	N4
130	5386-0302	N4
160	5386-0304	N4

Микро-шпатель, одноразовый



Двойной совок-шпатель с закруглёнными краями, объём 1,0 и 0,25 мл, общая длина 180 мм.

С помощью микро-шпателя можно производить отбор, перемещение и переработку малых количеств химикалий, порошков, гранулятов, паст, кремов или жидкостей. Стабильная и удобная серединная ручка облегчает точность работы.

Изготавливаются в чистой комнате, предлагаются в большой упаковке по 100 штук или в отдельной упаковке по 100 штук со стерилизацией гамма-излучением.

SteriPlast

LaboPlast



- Полистирол
- Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA
- Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением

Микро-шпатель V2A



С помощью микро-шпателя можно отмерять, отбирать в виде пробы или обрабатывать небольшие объёмы порошков, химикалий, паст, кремов или активных веществ. Лабораторная ложка изготовлена из нержавеющей стали и не имеет стыков, выемок и технологических неровностей, что исключает наличие (перекрёстных) загрязнений по причине отсутствия осаждения остатков продуктов или чистящих веществ.


Микро-шпатель идеально подходит для применения в фармацевтике, а также в пищевой и косметической промышленности.

- Нержавеющая сталь V2A (1.4301)
- Полированная поверхность
- Вместимость 1,25 мл




Микро-шпатель, одноразовый

Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.	
Большая упаковка	100	5378-0032	N4
Стерилизованная, индивидуальная упаковка	100	5378-1032	N4

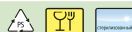

Микро-шпатель из нержавеющей стали

Общая длина мм	№ арт.	
170	5386-0001	N4

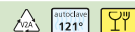

Ложка-шпатель V2A



Ложка-шпатель предлагает самые разнообразные возможности для применения. Двусторонняя универсальная ложка-шпатель включает в себя с одной стороны ложку, а с другой – шпатель. Это позволяет и отбирать пробы, и обрабатывать различные материалы, например, порошки, грануляты, пасты или жидкости. Ёмкость ложечной стороны ложки-шпателя составляет 4 мл или 11 мл.

Ложка-шпатель, изготовленная цельным образом из нержавеющей стали, не имеет стыков, выемок и технологических неровностей. Таким образом, на ней не образуются отложения из остатков продуктов и чистящих средств, а (перекрёстные) загрязнения исключаются. Тем самым универсальная ложка идеальна для применения в области химии, фармацевтики, косметики, а также в пищевой промышленности.

- ▶ Нержавеющая сталь V2A (1.4301)
- ▶ Полированная поверхность
- ▶ Двустороннее изделие

Ложка-шпатель из нержавеющей стали

Общая длина мм

180	№ арт. 5386-0022	N4
300	5386-0025	N4



Ложка-шпатель, одноразовая



SteriPlast

LaboPlast

Ложка-шпатель представляет собой двусторонний инструмент с ложкой 0,5 мл и шпателем 17 мм, общая длина 178 мм.

Ложка-шпатель находит в лаборатории широкое применение в качестве пробоотборной ложки, для замера и перемещения малых объёмов материалов, в качестве скребка или для смешивания / перемешивания компонентов.

Специальное исполнение для одноразового применения, устойчива к химикалиям и коррозии.

Изготавливаются в чистой комнате, предлагаются в большой упаковке по 100 штук или в отдельной упаковке по 100 штук со стерилизацией гамма-излучением.

- ▶ Полистирол
- ▶ Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением



Ложка-шпатель, одноразовая

Исполнение

Большая упаковка	Штук в упаковке 100
Стерилизованная, индивидуальная упаковка	100



№ арт. 5378-0031	N4
5378-1031	N4

Ложка для проб



Ложка для отбора проб небольшого объема. Ложка имеет специальную форму, позволяющую легко достать до каждого угла контейнера. Также благодаря форме ложки отобранный образец не рассыпается.

- ▶ Из нержавеющей стали V2A (1.4301)
- ▶ Высокая химическая устойчивость (за исключением сильных кислот и щелочей)

Ложка для проб

Длина мм	Объем мл	№ арт.
150	2	5320-0150 N4
180	2	5320-0180 N4
210	2	5320-0210 N4
300	9	5320-0300 N4
400	9	5320-0400 N4
500	9	5320-0500 N4



«ФармаСпун» (PharmaSpoon)



Ложка «Фарма» (Pharma) для отбора проб порошкообразных препаратов, промежуточных продуктов и исходного сырья в фармацевтическом производстве. Для отбора проб необходимо использовать оборудование, изготовленное из специальных материалов и характеризующееся высоким качеством обработки поверхности, чтобы избежать взаимного загрязнения проб. Мы предлагаем Вашему вниманию ложку «ФармаСпун» (PharmaSpoon), которая полностью соответствует этим требованиям. Она изготовлена из нержавеющей стали V4A (1.4404), поверхность отшлифована до блеска вручную (не с помощью электрополировки!). Прекрасное качество обработки поверхности обеспечивает существенные достоинства ложки «ФармаСпун» (PharmaSpoon).

- ▶ Возможные следы оставшихся на поверхности веществ хорошо видны (при количествах порядка мкг)
- ▶ Поверхность легко очищается
- ▶ С помощью «ФармаСпун» (PharmaSpoon) можно осуществлять отбор стерильных проб



Ложка «ФармаСпун» (PharmaSpoon) была разработана фармацевтической компанией мирового уровня, находящейся в Базеле, Швейцария. Высокое качество ложки было подтверждено на практике.

«ФармаСпун» (PharmaSpoon)

Общая длина мм	№ арт.
650	5324-0001 N2



Дозирующие ложки



Дозирующие ложки из нержавеющей стали, комплект из 4 штук, помощь при дозировке для простого и быстрого отмеривания объемов от 1,25 до 15 мл. Объем обозначен на ручке каждой из дозирующих ложек.

- Нержавеющая сталь V2A (1.4301)
- Объем: 1,25 мл, 2,5 мл, 5 мл, 15 мл
- Ложка высокого блеска, ручка с матовой полировкой

Дозирующие ложки из нержавеющей стали			
Объем мл	№ арт.		
1,25 - 15	5334-8000	N4	

Мерные ложки



Объем мерной ложки обозначен на ее ручке. Вы можете приобрести набор из 8 мерных ложек, а также упаковку из 100 мерных ложек.

- Полистирол синего цвета
- Круглая форма, удобная для пересыпания

Мерные ложки			
Объем мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
0,5 - 50	Мерные ложки, комплект 8 шт.	8	5334-0001 N4
0,5	Упаковка	100	5334-0005 N4
1	Упаковка	100	5334-0010 N4
2,5	Упаковка	100	5334-0025 N4
5	Упаковка	100	5334-0050 N4
10	Упаковка	100	5334-0100 N4
15	Упаковка	100	5334-0150 N4
25	Упаковка	100	5334-0250 N4
50	Упаковка	100	5334-0500 N4

Мерные совки



Универсальные мерные совки предназначены для определения количества и пересыпания порошков и гранулированных материалов. Для того, чтобы отмерить точный объем, необходимо заполнить совок с верхом, после чего удалить излишки так, чтобы поверхность порошка находилась вровень с верхними кромками совка.

- ПП, белые
- Высокая химическая устойчивость

Мерные совки			
Объем мл	Д x Ш мм	№ арт.	
2	60 x 21	9614-0002	N3
5	82 x 27	9614-0005	N3
10	100 x 34	9614-0010	N3
25	135 x 44	9614-0025	N3
50	160 x 55	9614-0050	N3
100	200 x 70	9614-0100	N3
250	260 x 90	9614-0250	N3
500	315 x 118	9614-0500	N3
1000	385 x 134	9614-1000	N3

Совок «ФармаСкуп» (PharmaScoop)



Эти пробоотборные совки были разработаны специально для нужд фармацевтической промышленности и отвечают всем необходимым требованиям, в том числе нормам FDA. Так же как и другие пробоотборники для фармацевтической промышленности, «ФармаСкуп» (PharmaScoop) изготовлены из нержавеющей стали V4A и не имеют стыков, выемок и технологических неровностей, в которых может скапливаться вещество отобранных проб, приводя к загрязнению других образцов. Внутренние и внешние поверхности отполированы. Совки «ФармаСкуп» (PharmaScoop) отвечают требованиям GMP по процессу изготовления и процедуре пробоотбора.

- ▶ Нержавеющая сталь V4A (1.4404)
- ▶ Соответствие правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)
- ▶ Полированная поверхность

Совок «ФармаСкуп» (PharmaScoop)							
Объём мл	Ø мм	Длина мм	№ арт.				
10	25	45	5324-0010	N4			
50	38	70	5324-0011	N4			
100	50	100	5324-0012	N4			
500	95	140	5324-0018	N4			
750	95	210	5324-0013	N4			
1000	110	235	5324-0014	N4			
1250	125	195	5324-0015	N4			
1700	135	230	5324-0016	N4			
2500	185	215	5324-0017	N4			
Совок «ФармаСкуп» (PharmaScoop) с длинной ручкой							
Объём мл	Ø мм	Длина мм	Общая длина мм	№ арт.			
1000	110	235	835	5324-0019	N4		

«ИзиСкуп» (EasyScoop)



При использовании обычных совков для отбора проб насыпных товаров, имеющих большой удельный вес, запястье оператора подвергается значительным нагрузкам. Эргономичный пробоотборный совок «ИзиСкуп» (EasyScoop) со специальной ручкой обеспечивает удобство и безопасность работы. «ИзиСкуп» (EasyScoop) имеет значительно меньшую длину, чем обычные совки, и он более удобен при отборе проб из ёмкостей с узким входным отверстием.

- ▶ Изготовлен из легкого алюминия с анодированной поверхностью

«ИзиСкуп» (EasyScoop)					
Объём мл	Длина мм	Вес г	№ арт.		
1500	200	325	5356-1500	N2	
2000	300	575	5356-2000	N2	

Совок, нержавеющая сталь



С помощью совка из нержавеющей стали можно отбирать пробы порошков, гранулятов и паст. Материал из нержавеющей стали V2A (1.4301) можно стерилизовать и автоклавировать. Совок из нержавеющей стали имеет гладкую полированную поверхность и может использоваться для продуктов питания.

Благодаря трубообразной форме совок легко погружается в обрабатываемый материал. При этом его высокие стенки предотвращают просыпание пробы. Круглая ручка гарантирует хороший захват. Прочный совок идеален для использования в химической, фармацевтической и пищевой отраслях.

- Из нержавеющей стали V2A (1.4301)
- Можно стерилизовать
- Прочный

Совок, нержавеющая сталь

Объем мл	Ø мм	№ арт.	
120	50	5370-0120	N3
450	75	5370-0450	N3
1000	100	5370-1000	N3
1500	120	5370-1500	N3
2500	150	5370-2000	N3

«ФудСкуп» (FoodScoop)



Очень прочный ручной совок для различных областей применения, прекрасно подходит для сферы пищевых продуктов. Бесшовное соединение совка и полной ручки, поэтому без технологических неровностей и кантов. Поверхности очень гладко отполированы.

- Очень прочная конструкция
- Из нержавеющей стали V2A (1.4301)
- С практичным ушком для подвешивания

«ФудСкуп» (FoodScoop)

Объем мл	Общая длина мм	Д x Ш мм	№ арт.	
100	215	120 x 60	5371-0100	N3
200	230	140 x 75	5371-0200	N3
250	245	155 x 85	5371-0250	N3
350	290	180 x 100	5371-0350	N3
500	350	220 x 130	5371-0500	N3

«ЛабоПласт» от Bürkle – символ качества для лабораторий и научных исследований



"ЛабоПласт" (LaboPlast®) – это бренд компании Bürkle, используемый для наших высококачественных изделий, разработанных специально для достижения оптимального соответствия высоким и отчасти специфическим требованиям лабораторий, промышленных предприятий и науки.

При этом "ЛабоПласт" (LaboPlast®) олицетворяет собой высочайшее качество, идеальную обработку и выдающиеся параметры материалов.

Проверьте эту продукцию в деле и оцените по достоинству нашу линию изделий "ЛабоПласт" (LaboPlast®)!



Изделия "ЛабоПласт Био" (LaboPlast® Bio) производятся исключительно из возобновляемого сырья. Даже раздельная упаковка нашей продукции изготавливается из биополиэтилена, что придаёт изделиям целостную логическую сбалансированность. Все материалы полностью пригодны для вторичной переработки и производятся без применения ископаемого сырья. Тем самым достигается уменьшение объёмов выброса CO₂ и сокращение парникового эффекта.

Безупречная комбинация высочайшего качества и экологической сбалансированности!



Совок «ЛабоПласт» (LaboPlast®), одноразовый



Совок одноразового использования «ЛабоПласт» (LaboPlast®) из полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000, кроме совка на 1000 мл). Он собирается и отдельно упаковывается для одноразового использования. Совок одноразового использования – это идеальное решение для работы с порошками, гранулами или пастами. Сразу же после отбора пробы совок снова закрывается прозрачной крышкой, обеспечивая отобранному материалу защиту от загрязнений.

- Полистирол, белый
- Раздельная упаковка
- Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Совок «ЛабоПласт» (LaboPlast®), одноразовый

Объём мл	Исполнение	Длина мм	Штук в упаковке	№ арт.	
25	без крышки	141	10	5378-0001	N4
25	с крышкой	142	10	5378-0002	N4
50	без крышки	160	10	5378-0003	N4
50	с крышкой	161	10	5378-0004	N4
100	без крышки	205	10	5378-0005	N4
100	с крышкой	206	10	5378-0006	N4
150	без крышки	216	10	5378-0007	N4
150	с крышкой	218	10	5378-0008	N4
250	без крышки	232	10	5378-0013	N4
250	с крышкой	235	10	5378-0014	N4
500	без крышки	280	10	5378-0015	N4
500	с крышкой	283	10	5378-0016	N4
1000	без крышки	332	10	5378-0019	N4

Совок «ЛабоПласт Био» (LaboPlast® Bio)



Совок одноразового использования «ЛабоПласт Био» (LaboPlast® Bio) из Green PE изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). С целью одноразового использования он отдельно упаковывается в плёнку из биополиэтилена.

Био-материал Green PE обладает всеми характеристиками обычного полиэтилена, идеально подходящими для отбора проб, однако он производится из возобновляемого сырья и полностью пригоден для вторичной переработки.

- Изделие и упаковка из возобновляемого сырья
- Биополиэтилен, белый
- Раздельная упаковка
- Производство и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Совок «ЛабоПласт Био» (LaboPlast® Bio)

Объём мл	Длина мм	Штук в упаковке	№ арт.	
25	141	10	5379-0001	N4
50	160	10	5379-0003	N4
100	205	10	5379-0005	N4
150	216	10	5379-0007	N4

Шпатель «ЛабоПласт» (LaboPlast®), одноразовый



Шпатель одноразового использования «ЛабоПласт» (LaboPlast®) из полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Он собирается и раздельно упаковывается для одноразового использования. Даже такое одноразовое изделие обеспечивает возможность прокола тары, например, бумажного или полимерного мешка благодаря длинной и стабильной ручке эргономичной формы, а также острому лезвию. Шпатель одноразового использования представляет собой идеальное решение для отбора проб в виде порошка, гранулята или пасты.

Шпатель с прозрачным футляром можно закрыть сразу же после отбора проверяемого материала, защищая тем самым взятую пробу от внешних загрязнений.

- Полистирол, белый
- Раздельная упаковка
- Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Шпатель «ЛабоПласт» (LaboPlast®), одноразовый						
Исполнение	Общая длина мм	Глубина врезания мм	Штук в упаковке	№ арт.		
без футляра	263	150	10	5378-0009	N4	
с футляром	268	150	10	5378-0010	N4	

Шпатель «ЛабоПласт Био» (LaboPlast® Bio)



Шпатель одноразового использования «ЛабоПласт Био» (LaboPlast® Bio) из Green PE изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). С целью одноразового использования он раздельно упаковывается в плёнку из биополиэтилена.

Биополимер Green PE обладает всеми характеристиками обычного полиэтилена, идеально подходящими для отбора проб, он полностью пригоден для вторичной переработки и производится из возобновляемого сырья. Даже такое одноразовое изделие обеспечивает возможность прокола тары, например, бумажного или полимерного мешка благодаря длинной и стабильной ручке эргономичной формы, а также острому лезвию. Шпатель представляет собой идеальное решение для отбора проб из порошка, гранулята или пасты.

- Изделие и упаковка из возобновляемого сырья
- Green PE, белый
- Раздельная упаковка
- Производство и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Шпатель «ЛабоПласт Био» (LaboPlast® Bio)					
Общая длина мм	Глубина врезания мм	Штук в упаковке	№ арт.		
263	150	10	5379-0009	N4	

Ложка «ЛабоПласт» (LaboPlast®), одноразовая



Ложка одноразового использования «ЛабоПласт» (LaboPlast®) из полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000) и отдельно упаковывается для одноразового использования.

Ложка предлагается в двух размерах: 2,5 мл (как чайная ложка) и 10 мл (как столовая ложка). Она представляет собой идеальное решение для забора проб в виде порошка, гранулята, пасты или жидкости.

- Полистирол, белый
- Раздельная упаковка
- Производство и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA



Ложка «ЛабоПласт» (LaboPlast®), одноразовая

Длина мм	Объём мл	Штук в упаковке	№ арт.	
127	2,5	100	5378-0011	N4
170	10	100	5378-0012	N4

Ложка «ЛабоПласт Био» (LaboPlast® Bio)



Ложка одноразового использования «ЛабоПласт Био» (LaboPlast® Bio) из Green PE изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). С целью одноразового использования она отдельно упаковывается в плёнку из биополиэтилена.

Био-материал Green PE обладает всеми характеристиками обычного полиэтилена, идеально подходящими для отбора проб, однако он производится из возобновляемого сырья и полностью пригоден для вторичной переработки.


Ложка одноразового использования предлагается в двух размерах: 2,5 мл (как чайная ложка) и 10 мл (как столовая ложка). Она представляет собой идеальное решение для забора проб в виде порошка, гранулята, пасты или жидкости.

- Изделие и упаковка из возобновляемого сырья
- Green PE, белый
- Раздельная упаковка
- Производство и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7
- В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Ложка «ЛабоПласт Био» (LaboPlast® Bio)

Длина мм	Объём мл	Штук в упаковке	№ арт.	
127	2,5	100	5379-0011	N4
170	10	100	5379-0012	N4

Скребок

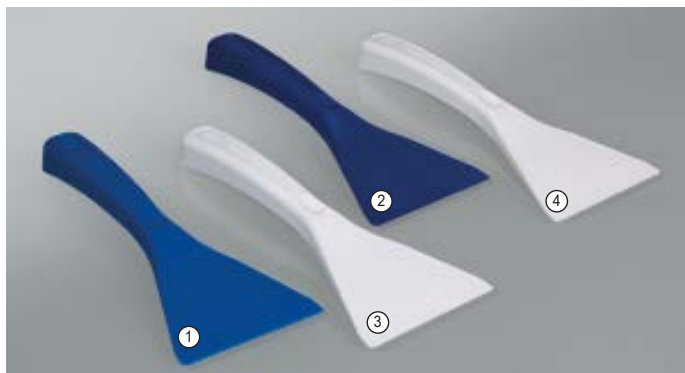

① Скребок для пищевых продуктов, синий

Скребок для пищевых продуктов «СтериПласт» (SteriPlast®) из синего полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Он разделяется и упаковывается для одноразового применения, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Стабильный и удобный скребок для одноразового применения. Скребок предназначен для соскабливания, разравнивания или очистки, а также для удаления остатков.

- ▶ Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS
- ▶ Специальная разработка для пищевой, кормовой и фармацевтической промышленности

② Детектируемый скребок, синий

Детектируемый скребок «СтериПласт» (SteriPlast®) из синего полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Он разделяется и упаковывается для одноразового применения, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Стабильный и удобный скребок для одноразового применения. Детектируемый скребок предназначен для соскабливания, разравнивания или очистки, а также для удаления остатков.

- ▶ Возможность выявления с помощью электронного цветодетектора, металлодетектора или рентгеновских лучей

③ Скребок «ЛабоПласт» (LaboPlast®), одноразовый

Скребок «ЛабоПласт» (LaboPlast®) из полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Он собирается и разделяется и упаковывается для одноразового использования.

Стабильный и удобный скребок для одноразового применения. Скребок предназначен для соскабливания, разравнивания или очистки, а также для удаления остатков.

- ▶ Раздельная упаковка

④ Скребок «СтериПласт» (SteriPlast®)

Скребок «СтериПласт» (SteriPlast®) из полистирола изготавливается в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). Он разделяется и упаковывается для одноразового применения, а затем стерилизуется гамма-излучением.

Стабильный и удобный скребок для одноразового применения. Скребок предназначен для соскабливания, разравнивания или очистки, а также для удаления остатков.


- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация гамма-излучением



① Скребок для пищевых продуктов, синий				
Д x Ш мм	Штук в упаковке	№ арт.		
200 x 80	10	5378-3030 N4		
② Детектируемый скребок, синий				
Д x Ш мм	Штук в упаковке	№ арт.		
200 x 80	10	5378-2030 N4		
③ Скребок «ЛабоПласт» (LaboPlast®), одноразовый				
Д x Ш мм	Штук в упаковке	№ арт.		
200 x 80	10	5378-0030 N4		
④ Скребок «СтериПласт» (SteriPlast®)				
Д x Ш мм	Штук в упаковке	№ арт.		
200 x 80	10	5378-1030 N4		

Бürkle по всему миру

Возможно, офис нашей компании и располагается далеко от Вас,
однако хотя бы один из наших партнеров, наверняка, где-то рядом!

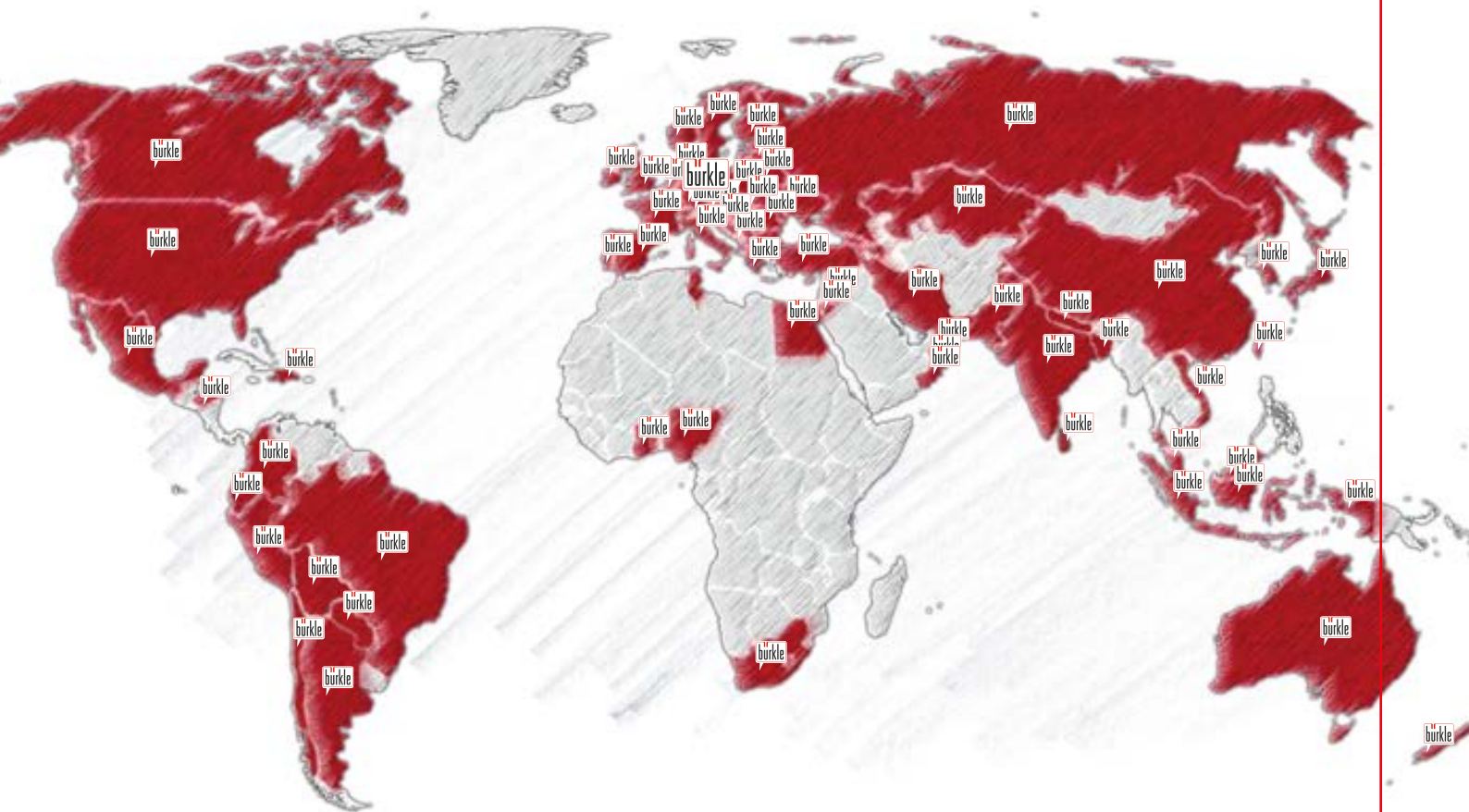

Вам требуется контактное лицо и дистрибьютор?

На сайте www.buerkle.de → **Дистрибьюторы и партнеры** Вы без труда найдете ближайших к Вам представителей нашей компании.

Совки и скребки из пластика

Железные совки не очень удобны, потому что могут деформироваться и покрываться ржавчиной. Кроме того, они гремят при работе и достаточно тяжелы. Пластиковые совки не имеют этих недостатков, кроме того, они гигиеничны, поскольку изготовлены из единого куска и к их поверхности ничто не прилипает. Помимо этого, пластиковые совки обладают неоценимыми преимуществами! Они характеризуются высокой химической устойчивостью и очень прочны.

Совки могут быть изготовлены в различных модификациях (антистатической, противомикробной, для работы с пищевыми продуктами). Совки имеют различную окраску и при этом не содержат кадмия.

Совки и скребки производятся из полипропилена, с различными добавками в зависимости от области использования:

- ▶ Промышленное производство: зелёные
- ▶ Пищевые продукты: белые

Шесть наименований

- ▶ Скребок с жесткой ручкой
- ▶ Ручной совок
- ▶ Совок-черпак, прекрасно подходит для отбора проб
- ▶ Составной совок с петлеобразной ручкой
- ▶ Составной совок с Т-образной ручкой
- ▶ Целый совок, снижает загрязнение

Области применения

Фармацевтика, биотехнология, химия, производство, сельское хозяйство, рыбоводство, пробоотбор, ветеринария, работа с пищевыми продуктами и кормами.



Совки и скребки для пищевых продуктов

Совки изготовлены из полипропилена и обладают гладкой поверхностью, не имеющей пор, поэтому совки легко очищать. Таким образом, они прекрасно подходят для сферы пищевых продуктов. Совки также можно использовать для работы с материалами, нагретыми до температуры кипения.

- ▶ Для пищевых продуктов (FDA и (EU) Nr. 10/2011)

① Ручной совок, пищевые продукты				  
Д x Ш мм		Общая длина см	Вес г	№ арт.
315 x 247		52,7	509	8300-1010 N3
② Совок-черпак, пищевые продукты				  
Ш x Г x Д мм		Общая длина см	Вес г	№ арт.
110 x 150 x 250		25	90	8300-5010 N3
138 x 187 x 310		31	187	8300-5011 N3
167 x 230 x 355		35	289	8300-5012 N3
③ Целый совок, пищевые продукты				  
Ручка	Ш x Г x Д мм	Общая длина см	Вес г	№ арт.
D	279 x 362 x 1107	111	1564	8300-0010 N3
D	347 x 410 x 1100	110	1882	8300-0011 N3
④ Составной совок, пищевые продукты				  
Ручка	Ш x Г x Д мм	Общая длина см	Вес г	№ арт.
T	247 x 315 x 966	97	1040	8300-2010 N3
⑤ Скребок, пищевые продукты				  
Д x Ш мм			Вес г	№ арт.
205 x 75			44	8300-4011 N3
250 x 110			80	8300-4010 N3

Совки и скребки из пластика



① Ручной совок, промышленный					
Д x Ш мм		Общая длина см	Вес г	№ арт.	
315 x 247		51,5	509	8300-1003	N3
350 x 257		58,7	810	8300-1001	N3
② Совок-черпак, промышленный					
Ш x Г x Д мм		Общая длина см	Вес г	№ арт.	
110 x 150 x 250		25	90	8300-5001	N3
138 x 187 x 310		31	187	8300-5002	N3
167 x 230 x 355		35	289	8300-1002	N3
③ Составной совок, промышленный					
Ручка	Ш x Г x Д мм	Общая длина см	Вес г	№ арт.	
T	247 x 315 x 966	97	1004	8300-2001	N3
D	257 x 350 x 1045	104,5	1280	8300-3006	N3
④ Скребок, промышленный					
Д x Ш мм			Вес г	№ арт.	
205 x 75			44	8300-4001	N3
250 x 110			80	8300-4002	N3

Совки и скребки для промышленности

Антистатические добавки позволяют использовать совки в производстве и в химической промышленности. Полипропилен обладает высокой химической и термической устойчивостью. Совки очень прочны, просты в очистке и имеют малый вес.

► Антистатические

